



Pulzní oxymetr na zápěstí

Bluetooth / USB

Nonin Medical, Inc.

Popis zdravotnického prostředku

Zdravotnický prostředek WristOx₂[®] 3150 je všestranný pulzní oxymetr na zápěstí s technologií Nonin PureSAT[®] SpO₂. WristOx₂[®] 3150 umožňuje vysoce přesné měření funkční saturace arteriálního hemoglobinu kyslíkem (%SpO₂) a tepové frekvence i u pacientů s nízkou perfuzí a během pohybu. Je kompatibilní s mnoha senzory Nonin PureLight[®]. Lze jej používat jak v nemocnici, tak během domácí péče.



WristOx₂[®] 3150 má ergonomický design a je k dispozici v USB nebo Bluetooth verzi. Verze s Bluetooth technologií nabízí eliminaci použití kabelu a usnadňuje stahování naměřených dat. Kapacita baterie zvládne až 53hodinový monitoring. Paměť pojme až 1 080 hodin záznamu.

Software

Software nVISION je určen pro off-line analýzu naměřených dat s patientskou databází. Obsahuje utility pro 6minutový test chůzí, nebo pro spánkový screening.



přizpůsobitelný řemínek



jednorázový řemínek

Výhody

- technologie PureSAT[®] SpO₂
- ergonomický design
- kompatibilita se senzory Nonin PureLight[®]
- možnost bezdrátové Bluetooth technologie
- SW nVISION[®] pro off-line vyhodnocení naměřených dat

Určení

Ideální pulzní oxymetr pro dlouhodobý monitoring, převážně pro noční spánkový screening, nebo jako součást zátěžových testů, a nebo pro 6minutový test chůzí.



jednorázové příslušenství



WristOx PC USB kabel



ochranná brašna



jednorázový senzor

Technická data

rozměry (v x š x h)	51 mm x 73 mm x 19 mm
hmotnost (s bateriemi)	70 g
záruka	3 roky
rozmezí tepové frekvence	18 až 321 tepů/min
rozmezí saturace krve kyslíkem (%SpO ₂)	0 % až 100 %

Typy produktů

NONIN WristOx2® Model 3150 – Bluetooth Low Energy (BLE) (včetně senzoru 8000SM-WO2)	3150BLE-0101
NONIN WristOx2® Model 3150 – Bluetooth Low Energy (BLE) (včetně senzoru 8000J-WO2)	3150BLE-0103
NONIN WristOx2® Model 3150SK BLE Starter Kit – Bluetooth Low Energy (BLE) (včetně softwaru nVision a dat. kabelu 3150SC a senzoru 8000SM-WO2)	3150SK BLE-01
NONIN WristOx2® Model 3150USB (without Bluetooth) (bez Bluetooth, včetně senzoru 8000SM-WO2)	3150USB-0101
NONIN WristOx2® Model 3150USB (without Bluetooth) (bez Bluetooth, včetně senzoru 8000J)	3150USB-0103
NONIN WristOx2® Model 3150SK USB Starter Kit (without Bluetooth) (bez Bluetooth, včetně SW nVision a dat. kabelu 3150SC a senzoru 8000SM-WO2)	3150SK USB-01

Volitelné příslušenství (není součástí balení)

NONIN 8000J-WO2 FlexSenzor na opakované použití pro WristOx2® 3150	7702-000
NONIN 8000JFW jednorázové lepicí pásky FlexiWraps®	4097-000
Přenosný obal pro oxymetr WristOx2 3150	4294-000
NONIN 8000SS-WO2 malý měkký gumový senzor na prst pro WristOx2® 3150 (délka 0,3 m)	6837-800
NONIN 8000SM-WO2 střední měkký gumový senzor na prst pro WristOx2® 3150 (délka 0,3 m)	6836-800
NONIN 8000SL-WO2 velký měkký gumový senzor na prst pro WristOx2® 3150 (délka 0,3 m)	6835-800
NONIN 8000AA-WO2 prstový Clip senzor na opakované použití pro WristOx2® 3150 (délka 0,3 m)	7701-001
NONIN 3150WB-SU jednoráz. páska na zápěstí	114241-001
NONIN 3150WB páska na zápěstí na opakované použití (33 cm)	8911-001
NONIN Software nVision™, CD-ROM	3211-000
NONIN 3150SC datový kabel pro oxymetr 3150 WristOx2®	7703-001


MR Diagnostic s. r. o.

Pod Višňovkou 1662/21
140 00 Praha 4
Česká republika

info@mr-diagnostic.cz
+420 245 005 648

Račianska 72
831 02 Bratislava 3
Slovenská republika

info@mr-diagnostic.cz
+421 (0)2 20 633 367

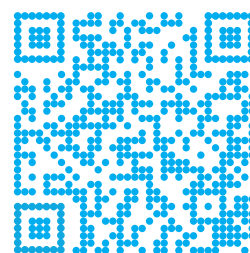

www.mr-diagnostic.cz