

Bakteriální a virový filtr pro funkční vyšetření plic

eXagotec GmbH

Popis

Zdravotnický prostředek HexaFilt® je nesterilní jednorázový bakteriální a virový filtr. Pomáhá zabránit křížové kontaminaci zařízení pro funkční vyšetření plic tím, že zachycuje mikroorganismy, částice a respirační kapénky a chrání tak bezpečnost pacienta i ošetřujícího personálu. Filtry navíc zvyšují životnost průtokových snímačů u spirometrů (není nutná dezinfekce po každém manévru). Účinnost filtru je vyšší jak 99,999 %. Prodloužení na spodní straně náustku určené pacientovi udržuje jazyk ve správné poloze, aby se zabránilo zvýšení odporu během vyšetřování. Náustek ve tvaru půlměsíce imituje přirozenou podobu otevřených úst, a tím zabraňuje netěsnostem v koutcích. Šestiúhelníkový tvar snižuje spotřebu plastu.



Určení

Filtr HexaFilt® je určený pro funkční vyšetření plic (PFT) v klinické praxi. Je kompatibilní se zařízeními pro funkční vyšetření plic, se spirometrickými systémy, celotělovou pletysmografií a vyšetřeními difuze s FeNO.

Výhody

- nízká hmotnost
- malý mrtvý prostor
- účinnost filtru >99,999 %
- vylepšená ergonomie náustku
- praktický a pohodlný nosní klip s pěnovými polštářky
- kompatibilita s téměř všemi spirometrickými systémy
- šestiúhelníkový tvar filtru pro snížení odpadu

Kontraindikace a nežádoucí účinky

HexaFilt® není určen k použití s bronchoprovokačními nebulizátory, pro použití s plicními ventilátory, s anesteziologickým vybavením a s vysokoprůtokovou kyslíkovou terapií. Před jeho použitím je nutné si přečíst informace uvedené v návodu k použití.



Nosní klip

Technická data

délka	71 mm
šířka	maximální průměr: 94 mm minimální průměr: 85 mm
průměr připojení (na straně k zařízení)	29,5 mm
hmotnost korpusu	18 g
efektivní mrtvý prostor	< 35 ml
materiál	korpus: PP (bez latexu) filtrační médium: BFE/VFE materiál
provozní a skladovací teplota	-5 °C až +40 °C

Typy produktů

Objednací kód

HexaFilt® jednorázový bakteriální/virový filtr (bal. 100 ks):	11000
HexaFilt® jednorázový bakteriální/virový filtr s nosním klipem (bal. 100 ks):	11010


MR Diagnostic s. r. o.

Pod Višňovkou 1662/21
140 00 Praha 4
Česká republika

info@mr-diagnostic.cz
+420 245 005 648

Račianska 72
831 02 Bratislava 3
Slovenská republika

info@mr-diagnostic.cz
+421 (0)2 20 633 367

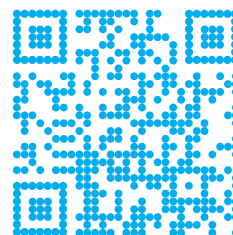

www.mr-diagnostic.cz