

Kalibrační pumpa s objemem 3 litry

medical equipment europe GmbH

Popis

Zdravotnický prostředek smart pft syringe je lehká a snadno ovladatelná kalibrační pumpa s objemem 3 litry. Představuje spolehlivý nástroj pro kalibraci nebo ověřování snímačů průtoku a objemu u systémů pro diagnostiku plicních funkcí, jako jsou spirometry a další diagnostická zařízení pro měření funkce plic, která měří proudění vzduchu během dýchání přes snímač.



Kalibrační pumpa se používá výhradně manuálně pomocí úplných zdvihů táhla mezi krajními polohami. Pohybem táhla se vhání nebo nasává přesně definovaný objem vzduchu skrze měřený snímač při různých průtocích, čímž se ověřuje přesnost a linearita měřicího systému v celém rozsahu jeho pracovních průtoků. Takové testování se obvykle provádí denně, nebo po či během údržby, opravy a kontroly a trvá přibližně 5 minut.

Upozornění

Jedná se o zdravotnický prostředek a před jeho použitím je nutné si důkladně přečíst návod k použití.

Výhody

- nízká hmotnost kalibrační pumpy
- snadná manipulace s táhlem pumpy
- univerzálnost použití

Technická data

objem	3 000 ml $\pm 0,4$ %
délka	55,0 cm
průměr	11,2 cm
průměr připojení	3,5 cm
hmotnost	1320 g

Typy produktů

smart pft syringe

Objednací kód

18003

Volitelné příslušenství (není součástí balení)

sealing plug smart pft syringe
(těsnicí zátka smart pft syringe)

18009


MR Diagnostic s. r. o.

Pod Višňovkou 1662/21
140 00 Praha 4
Česká republika

info@mr-diagnostic.cz
+420 245 005 648

Račianska 72
831 02 Bratislava 3
Slovenská republika

info@mr-diagnostic.cz
+421 (0)2 20 633 367

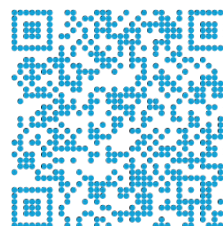

www.mr-diagnostic.cz