



Antistatický inhalační nástavec

PARI GmbH

Popis

PARI VORTEX je vytvořen, aby pomohl zlepšit depozici aerosolu s medikací do plic. Pomáhá překonávat koordinační problémy, které mají pacienti při špatném používání samotného aerosolového dávkovače (MDI).



Antistatická inhalační pomůcka VORTEX pracuje na jedinečném principu cyklonového víru, který pomáhá překonat nevýhody při nádechu pacienta u inhalátorů jako takových. Při nadechnutí se oblak aerosolu přemění na vír. Díky tomu je oblast úst a hltanu chráněna před nežádoucím usazováním léčiva a jemné kapénky jsou snadněji přeneseny do plic.

Určení

Pro všechny typy běžných aerosolových dávkovačů (MDI).



Vortex s maskou pro děti od 2 let



Dětská maska (0-2 roky)



Dětská maska (od 2 let)

Výhody

- antistatická kovová komora
- možnost čištění v myčce
- viditelný výdechový ventil pro rozpoznání inhalace
- nástavec pro inhalaci jednou rukou
- optimalizovaný univerzální adaptér pro použití dávkovačů MDI
- malý, lehký, praktický
- možnost výměny masek
- možnost použití i u kojenců



Vortex s MDI dávkovačem

Technická data (bez masky)

| | |
|-----------------|----------------|
| rozměry (v x š) | 150 mm x 50 mm |
| hmotnost | 80 g |

Typy produktů

| | Objednací kód | Kód VZP |
|---|---------------|---------|
| PARI VORTEX chamber s náustkem (od 4 let) | 051G5000 | 5008291 |
| PARI VORTEX chamber s dětskou maskou A (0-2 roky) | 051G5020 | 5008339 |
| PARI VORTEX chamber s dětskou maskou B (od 2 let) | 051G5040 | 5008349 |

Volitelné příslušenství (není součástí balení)

| | |
|------------------------|----------|
| náustek Vortex (10 ks) | 051G5101 |
|------------------------|----------|



Vortex s náustkem



Vortex nástavec pro MDI dávkovač



Vortex náhradní náustek



Vortex s náustkem pro dospělé



Vortex s maskou pro děti od 2 let



Vortex s maskou pro děti (0 - 2 roky)



Vortex pro pacienty s tracheostomií


MR Diagnostic s. r. o.

Pod Višňovkou 1662/21
140 00 Praha 4
Česká republika

info@mr-diagnostic.cz
+420 245 005 648

Račianska 72
831 02 Bratislava 3
Slovenská republika

info@mr-diagnostic.cz
+421 (0)2 20 633 367

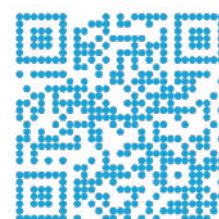

www.mr-diagnostic.cz